
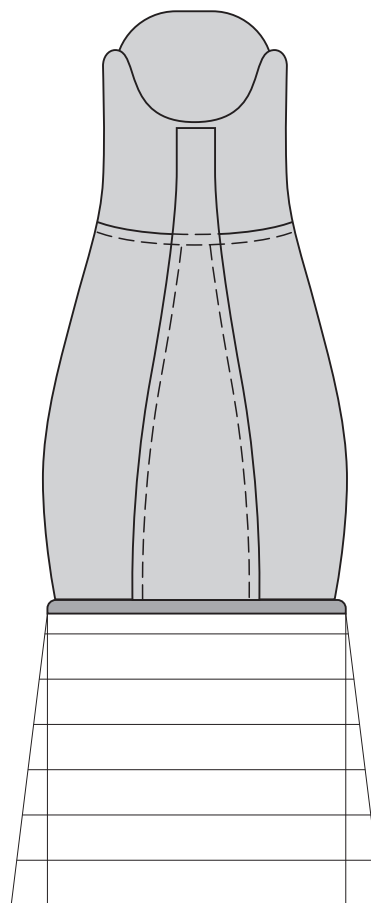


W przypadku indywidualnego wykonania skrótu konieczne jest naniesienie sposobu jego wykonania na schemacie wraz z podaniem wymiarów.

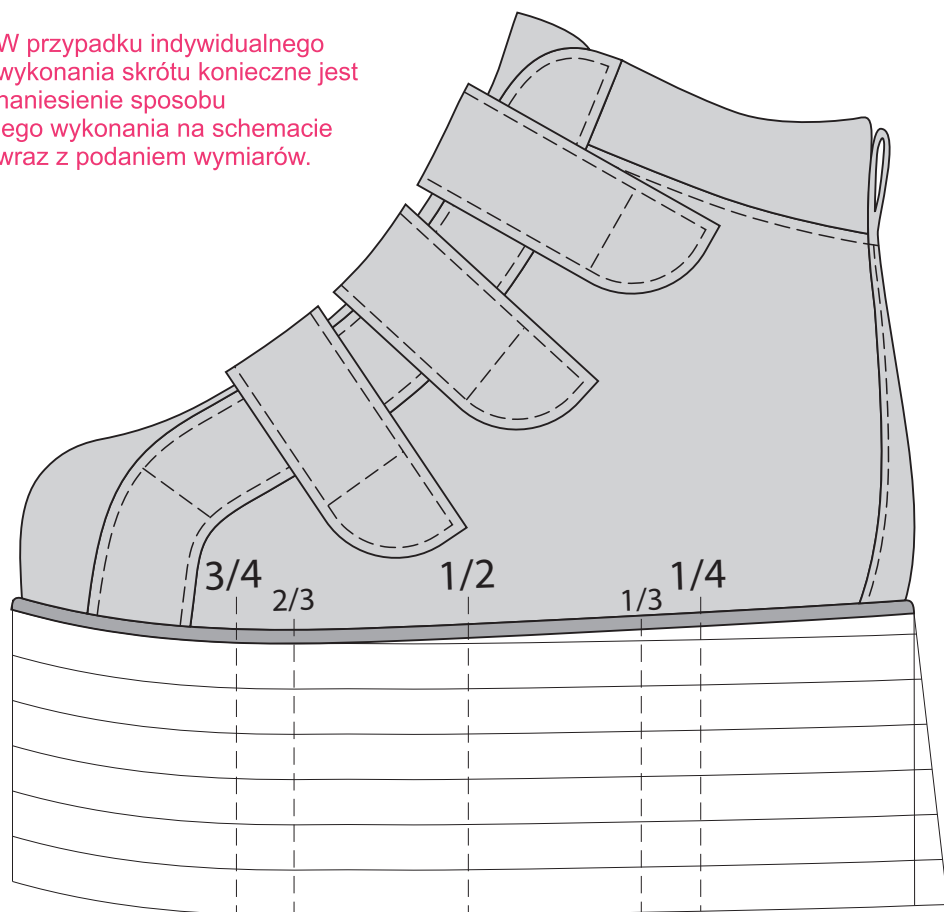

W obuwiu marki AurelkaORTO® skrót może być wykonany w podeszwie lub w podpodeszwie (wewnątrz obuwia).

Sposób wykonania korekty uwarunkowany jest wysokością skrótu.

Możliwe warianty wykonania modyfikacji:

- skrót wykonany wewnątrz obuwia - jeśli jego wysokość nie przekracza 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu
- skrót w podeszwie (każda wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta)
- część skrótu wykonana wewnątrz obuwia w przypadkach, gdy korekcja ma być mniej widoczna, pozostała część skrótu wykonana jest w podeszwie. Skrót wewnątrz nie może przekraczać 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu. Część zewnętrzna skrótu może mieć różną wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Skrót wykonywany jest zawsze z przekolebaniem rozpoczynającym się na wysokości piątej głowy kości śródstopia (2/3 długości podpodeszwy).

Możliwe jest również przekolebanie w części piętowej, która ułatwia przetoczenie stopy przy wyższych skrótach.

Na życzenie klienta, skrót może być wykonany bez przekolebania, a z zachowaniem tej samej wysokości zarówno w tyłostopiu, jak i w przodostopiu.



Skrót po całości z przekolebaniem



Skrót po całości bez przekolebania



Skrót z zejściem i przekolebaniem



Skrót z zejściem bez przekolebania